

**SOPORTE TÉCNICO
877.710.6999****QUE SE ESPERA**

- Cada vez que el Unicorder se enciende, se deben completar los 10 segundos de rutina del encendido.
- Una alerta sonará, si el Unicorder no está recibiendo buena señal

☾ DURANTE SU ESTUDIO DEL SUEÑO

Paso 1 Complete el cuestionario “Watermark Medical ARES”

Paso 2 Apague la TV, radio, ventiladores o cualquier otro aparato electrónico que puedan interferir con el micrófono.

Paso 3 Encienda el Unicorder. Un audio alerta sonará, significando que el período del encendido se ha completado. Usted puede, ahora, montar posiciones e ir a dormir.


☀ EN LA MAÑANA

Paso 1 Cuando usted despierta, si la luz verde en frente del Unicorder está iluminada, apáguelo. Si la luz ya no está iluminada, el Unicorder ha cesado de grabar automáticamente. Esto es normal, y usted no necesita apagarlo.

Paso 2 Regrese el Unicorder a su bolsa plástica..

Paso 3 Regrese la caja que se provee, conteniendo el Unicorder (cerrado en la bolsa plástica) y el cuestionario al facilitador, donde usted recibió el Unicorder ARES

**SOPORTE TECNICO:
877.710.6999**

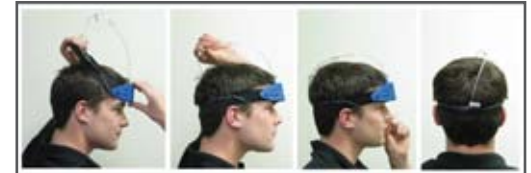

Paso 1 Lave y seque vigorosa-mente su frente.

Paso 2 Remueva la cubierta de plástico de los electrodos.

Paso 3 Sostenga los extremos de la cánula (2 puntas extendidas del tubo plástico transparente) en contra del fondo del Unicorder con sus dos pulgares y deslice la faja sobre su cabeza.



Sostenga los extremos de la cánula con sus pulgares

Paso 5 Coloque los extremos de las cánulas dentro de las ventanas de la nariz.

Agarre la cánula con su mano y hale hacia afuera, desde la parte posterior de su cabeza hasta que se sienta a gusto.

Coloque los extremos de la cánula dentro de las ventanas de la nariz.



Paso 4 Centre el Unicorder con su nariz y ligeramente sobre sus cejas. Remueva cualquier cabello que quede debajo del censor. Asegúrese que los sensores y electrodos hagan completo contacto con su piel.



Deslice la faja sobre su cabeza

Paso 6 Usando su otra mano, agarre el extremo del tubo y hale hacia la parte de atrás de su cabeza hasta que el tubo quede a gusto sobre la porción plástica de la faja. Cuando se aprieta apropiadamente, la cánula no puede halarse desde su nariz.

Hale la cánula hacia atrás de manera que los extremos queden a gusto en las ventanas de su nariz



En caso que la misma Alerta suene mas de 2 veces, favor llamar a Soporte Técnico
1.877.710.6999

**ALERTAS DURANTE LA NOCHE,
 DEBIDO A CALIDAD DE SEÑAL
 POBRE**

Para parar una alarma, sacuda su cabeza tal si dijera NO.

Luego re-posicione el Unicorder en su frente y apriete los extremos del tubo de la cánula

La alarma sonará de nuevo si el problema no es resuelto apropiadamente.

* Si cualquier alerta suena mas de dos veces, llame a Soporte Técnico

**MENSAJE DE ERROR
 “START-UP” O DE ENCENDIDO**

ALERTA DE AUDIO	REPITA CADA	INDICACION
“Las baterías del Unicorder están bajas, Deben ser recargadas”	3 segundos	Las Baterías no están cargadas
“Llame a Soporte Técnico, El Unicorder no esta funcionando. Código 1”	3 segundos	Problemas de Hardware, el estudio no puede ser realizado.